

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DuoDERM CGF a formula di gel controllato è una medicazione a base di idrocolloidi formata da uno strato interno di idrocolloidi ( a diretto contatto con la ferita ) contenuti in una matrice di polimeri adesivi e da uno strato di schiuma in poliuretano all'esterno. La medicazione determina un ambiente umido per la ferita che favorisce il processo di cicatrizzazione attraverso lo sbrigliamento autolitico, facilitando la migrazione delle cellule epiteliali e consentendo una rimozione atraumatica della medicazione, senza danneggiare i tessuti neoformati. DuoDERM CGF può essere impiegato quale medicazione primaria, o secondaria in combinazione con altre medicazioni. Lo strato adesivo contiene polimeri elastomerici che aumentano la capacità della medicazione di assorbire l'essudato della ferita, formando un gel coesivo.

## INDICAZIONI

**Ferite Croniche** - Piaghe da decubito ( stadio I-IV), Ulcere degli Arti Inferiori. **Ferite Acute** - Ferite Traumatiche (Abrasioni minori, Lacerazioni), Ustioni (1° e 2° grado ), Incisioni Cutanee, Ferite Chirurgiche ( Post-operatorio, Aree di prelievo).

## CONTROINDICAZIONI


Da non usarsi in pazienti con sensibilità nota alla medicazione o ai suoi componenti.

## PRECAUZIONI E OSSERVAZIONI

Questo dispositivo è monouso e non deve essere riutilizzato. La sua riutilizzazione può aumentare il rischio di infezione o di contaminazione crociata. Le proprietà fisiche del dispositivo potrebbero inoltre non essere più idonee all'uso corretto.

- 1) Appropriate misure di supporto dovranno essere adottate quando necessario ( per esempio, uso di bendaggio a compressione graduata nel trattamento di ulcere venose degli arti inferiori, o dispositivi per la riduzione della pressione di appoggio o nel trattamento di ulcere da decubito).
- 2.) L'effetto di sbrigliamento autolitico prodotto dalla medicazione potrebbe far apparire la ferita più larga dopo i primi cambi della medicazione.
- 3) La colonizzazione nelle ferite croniche avviene frequentemente e non costituisce controindicazione all'uso della medicazione. La medicazione può essere applicata su ferite infette sotto il controllo medico in combinazione ad appropriata terapia antibiotica, o frequente controllo della ferita. E' sconsigliato l'uso di terapia occlusiva in presenza di infezione anaerobica.
- 4) Raramente sono state rilevate irritazione e/o macerazione della cute, iporgranulazione e reazioni allergiche.
- 5) Si sconsiglia un cambio frequente delle medicazioni in ferite con cute perilesionale compromessa.

## APPLICAZIONE DELLA MEDICAZIONE DUODERM CGF

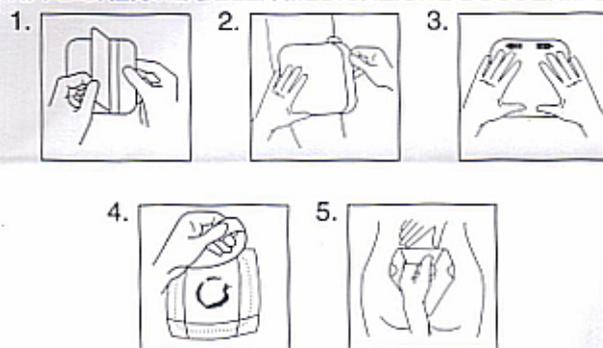

## APPLICARE LA MEDICAZIONE DUODERM CGF 3 CM OLTRE L'ESTENSIONE DELLA FERITA

Detergere la lesione con soluzione fisiologica.

1. Staccare la carta siliconata di protezione dal retro della medicazione , riducendo al minimo il contatto delle dita con la superficie adesiva.
2. Srotolare delicatamente la medicazione sopra la ferita, senza tirarla.
3. Far aderire delicatamente la medicazione sulla cute, assicurandone l'adesione ai margini della ferita.
4. Se necessario, fissare i margini della medicazione con cerotto ipoallergenico.

Nota: E' possibile il formarsi di un deposito di gel, sotto forma di bolla, sulla superficie esterna della medicazione, non appena l'essudato viene assorbito dalla medicazione.

## COME RIMUOVERE DUODERM CGF

5. Premendo con una mano sulla cute, sollevare delicatamente il bordo della medicazione con l'altra mano.

Si suggerisce di non lasciare la medicazione sulla ferita per più di sette giorni.

## CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente. Evitare la refrigerazione e l'esposizione ad alta umidità.

Questo prodotto è distribuito in confezione sterile.

© 2012 ConvaTec Inc.

® indicates a trademark of ConvaTec Inc.