

# Occhialini Binoculari

## ALTI INGRANDIMENTI ED IMMAGINI NITIDE E BRILLANTI CON ILLUMINAZIONE A LED

Gli occhialini binoculari HEINE definiscono standard di riferimento per design, materiali ad alta tecnologia e processi produttivi. Offrono una straordinaria qualità di immagini nitide da bordo-a bordo ed un ampio campo di visione.

Sono disponibili diversi ingrandimenti (2.3x a 6x), distanze di lavoro, sistemi di montaggio (montatura per occhialini S-FRAME, fascia frontale Lightweight e caschetto Professional L) e sistemi d'illuminazione. Per esempio, gli occhialini possono essere combinati con un illuminatore che fornisce una luce omogenea e senza riflessi anche in profonde cavità. Moderna tecnologia a LED con design di alta qualità!


Gli occhialini ingrandenti sono impiegati in molte discipline: p.e. medicina generale, dermatologia, chirurgia, chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oculistica, veterinaria, odontoiatria etc.



## HEINE Occhialini Binoculari – Introduzione

### Definizioni:

- **Distanza di Lavoro (x)**  
La distanza a cui l'ottica è chiaramente focalizzata.
- **Profondità di campo (y)**  
Il range entro cui l'immagine rimane chiaramente focalizzata.
- **Campo di Visione (z)**  
L'area che può essere vista sotto ingrandimento alla distanza nominale di lavoro.

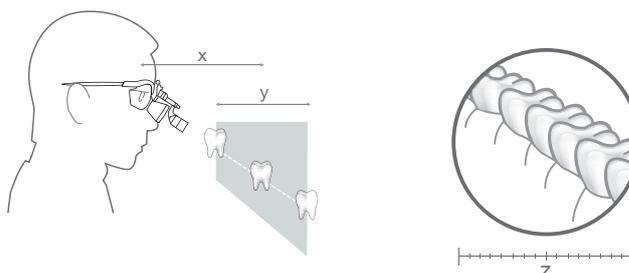

### Come scegliere i giusti Occhialini:

- **Scegli il tuo ingrandimento**  
Scegli l'ingrandimento più basso che soddisfi le tue esigenze. Più basso è l'ingrandimento, maggiore è il campo di visione e più facile sarà l'uso degli occhialini.
- **Scegli la tua ottica**
  - HR:** ottica ad Alta Risoluzione acromatica con eccellenti qualità ottiche.
  - HRP:** ottica ad Alta risoluzione Prismatica con eccellenti qualità ottiche per ingrandimento 3,5x e superiori.
  - HR-C:** Ottiche compatte e leggere con buone proprietà ottiche.
  - C:** sistema economico.
- **Scegli la tua distanza di lavoro**  
Questa è una scelta individuale che dipende dalle dimensioni dell'esaminatore e dalla posizione di lavoro. Maggiore è la distanza di lavoro, maggiore è il campo di visione.
- **Scegli la tua opzione di montaggio**  
Montatura ad occhiali o Caschetto.
- **Illuminazione aggiuntiva**  
Una illuminazione brillante e coassiale è particolarmente importante quando si usa un ingrandimento.

Occhialini Binoculari HEINE

	HR	HRP	HR-C	C
<b>Ingrandimento</b>				
2.3x				<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3.5x		<input type="checkbox"/>		
4x		<input type="checkbox"/>		
6x		<input type="checkbox"/>		
<b>Distanza di lavoro</b>				
250 mm (con le lenti aggiuntive)	<input type="checkbox"/>	--	--	--
340 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450 mm	--	--	--	<input type="checkbox"/>
520 mm	<input type="checkbox"/>	--	--	--
<b>Opzioni di montaggio</b>				
<b>S-FRAME</b>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
<b>Fascia front. Lightweight</b>				
	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Caschetto Professional</b>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
<b>Semplice montatura di metallo</b>				
	--	--	--	<input type="checkbox"/>
<b>Accessori</b>				
Lenti aggiunt. Close-up*	<input type="checkbox"/> (per 340mm)	--	--	--
Lenti di protezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
<b>LED LoupeLight (pag. 127/128)</b>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
<b>Caratteristiche</b>				
Funzione i-View**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Modulare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Acqua resistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Ottiche acromatiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Lenti di correzione optional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
pagg.	118 – 119	120 – 121	122	123

\* Con la lente aggiuntiva Close-up si riduce la distanza nominale di lavoro degli occhialini binoculari HR 2,5x da 340mm a 250mm.

\*\* **Funzionamento del i-View:** permette ogni angolo di visione e di sollevare le ottiche senza interferire nel raggio di illuminazione.



## Occhialini Binoculari HEINE® HR 2.5x con i-View reggicchialini girevole



### HR 2.5x Ottiche con i-View

- ∴ **Ottiche acromatiche** per immagini nitide e luminose, con correzione del colore.
- ∴ **Leggeri (51 g).**
- ∴ **Acqua-resistenti.**
- ∴ **Regolazione indipendente** delle ottiche destra e sinistra per una perfetta regolazione della Distanza Pupillare (PD).
- ∴ **Alto ingrandimento** con un ampio campo di visione ed eccellente profondità di campo – i nostri occhialini più venduti!
- ∴ **Il reggicchialini i-View** permette ogni angolo di visione e di ruotare verso l'alto le ottiche indipendentemente dalla LED LoupeLight optional.

- ∴ **Ottiche acromatiche multistrati**
- ∴ **Eccezionale range focale**
- ∴ **Immagini nitide ad alta risoluzione**
- ∴ **Sistema i-View, unico**

### HR 2.5x Dati tecnici

Distanza di lavoro in mm	340	420	520
Campo visivo in mm	90	130	180
Profondità di campo in mm	110	180	260



Montatura lenti di correzione, optional.

### Opzioni di montaggio:

#### ∴ HEINE S-FRAME®

- ∴ **Massimo comfort** con un design ergonomico e moderno.
- ∴ **Stanghette e nasello malleabili** per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di viso.
- ∴ **Materiali innovativi** – Carbonio Kinetium, riduce il peso (24 g).
- ∴ **Lenti di protezione in resistente policarbonato.**
- ∴ **Optional, è applicabile una montatura** per lenti di correzione.



Professional L Caschetto con S-GUARD

#### ∴ HEINE® Caschetto Professional L **con** S-GUARD®

- ∴ **Visiera paraspruzzi S-GUARD.**
- ∴ **Nasello ergonomico** per il massimo comfort durante lunghe procedure.
- ∴ **Totalmente regolabile in altezza e larghezza per ogni tipo di testa.**
- ∴ **Igienico e confortevole, cuscini in similpelle.**
- ∴ **Optional, è applicabile una montatura** per lenti di correzione.



Professional L Caschetto senza S-GUARD

#### ∴ HEINE® Caschetto Professional L **senza** S-GUARD®

- ∴ **Applicabile ai propri occhiali.**
- ∴ **Nasello ergonomico** per il massimo comfort durante lunghe procedure.
- ∴ **Totalmente regolabile in altezza e larghezza per ogni tipo di testa.**
- ∴ **Igienico e confortevole, cuscini in similpelle.**

Occhialini Binoculari HEINE HR® 2.5x

con i-View reggiocchialini girevole

**Set HR 2.5x con i-View reggiocchialini girevole**



Set A



Set B  
con S-GUARD



Set C  
senza  
S-GUARD

Distanza di lavoro in mm	340	420	520
<b>Set A:</b> Ottica HR 2.5x con i-View su S-FRAME Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Cinghietta reggimontatura Liquido detergente Panno per lenti Valigetta	C-000.32.355	C-000.32.356	C-000.32.567
<b>Set B:</b> Ottica HR 2.5x con i-View su caschetto Professional L visiera S-GUARD Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Liquido detergente Panno per lenti	C-000.32.365	C-000.32.366	C-000.32.367
<b>Set C (senza S-GUARD):</b> Ottica HR 2.5x con i-View su caschetto Professional L Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili	C-000.32.865	C-000.32.866	C-000.32.867

Accessori per occhialini e LED LoupeLight disponibili a pagg. 125 – 128.



## Occhialini Binoculari HEINE® HRP con i-View reggiocchialini girevole



### HRP Ottiche con i-View

- ⌘ **Ottiche acromatiche** per immagini nitide e luminose, con correzione del colore.
- ⌘ **Leggeri** (85 g).
- ⌘ **Acqua-resistenti**.
- ⌘ **Regolazioni indipendente** delle ottiche destra e sinistra per una perfetta regolazione della Distanza Pupillare (PD).
- ⌘ **Ingrandimenti superiori:** scelta tra 3,5x, 4x e 6x.
- ⌘ **Il reggiocchialini i-View** permette ogni angolo di visione e di ruotare verso l'alto le ottiche indipendentemente dalla LED LoupeLight optional.

⌘ **Ottiche multistrati**

⌘ **Prismatici, per massimo ingrandimento**

⌘ **Immagini nitide ad alta risoluzione**

⌘ **Sistema i-View, unico**

### Data tecnici HRP

Distanza di lavoro in mm	HRP 3.5x/420	HRP 4x/340	HRP 6x/340
Campo visivo in mm	65	50	40
Profondità di campo in mm	60	40	30

### Opzioni di montaggio:



Montatura lenti di correzione, optional.

### ⌘ HEINE S-FRAME®

- ⌘ **Massimo comfort** con un design ergonomico e moderno.
- ⌘ **Stanghette e nasello malleabili** per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di viso.
- ⌘ **Materiali innovativi** - Carbonio Kinetium, riduce il peso (24 g).
- ⌘ **Lenti di protezione in resistente policarbonato.**
- ⌘ **Optional, è applicabile una montatura** per lenti di correzione.



Professional L  
Caschetto con  
S-GUARD

### ⌘ HEINE® Caschetto Professional L con S-GUARD®

- ⌘ **Visiera paraspruzzi S-GUARD.**
- ⌘ **Nasello ergonomico** per il massimo comfort durante lunghe procedure.
- ⌘ **Totalmente regolabile in altezza e larghezza per ogni tipo di testa.**
- ⌘ **Igienico e confortevole, cuscini in similpelle.**
- ⌘ **Optional, è applicabile una montatura** per lenti di correzione.



Professional L  
Caschetto  
senza S-GUARD

### ⌘ HEINE® Caschetto Professional L senza S-GUARD®

- ⌘ **Applicabile ai propri occhiali.**
- ⌘ **Nasello ergonomico** per il massimo comfort durante lunghe procedure.
- ⌘ **Totalmente regolabile in altezza e larghezza per ogni tipo di testa.**
- ⌘ **Igienico e confortevole, cuscini in similpelle.**

Occhialini Binoculari HEINE® HRP

con i-View reggiocchialini girevole



Set A



Set B  
con S-GUARD



Set C  
senza  
S-GUARD

**Set HRP con i-View reggiocchialini girevole**

Distanza di lavoro in mm	HRP 3.5 x/420	HRP 4 x/340	HRP 6 x/340
<b>Set A:</b> Ottica HRP con i-View su S-FRAME Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Cinghietta reggimontatura Liquido detergente Panno per lenti Valigetta	C-000.32.430	C-000.32.431	C-000.32.432
<b>Set B:</b> Ottica HRP con i-View su caschetto Professional L visiera S-GUARD Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Liquido detergente Panno per lenti	C-000.32.440	C-000.32.441	C-000.32.442
<b>Set C (senza S-GUARD):</b> Ottica HRP con i-View su caschetto Professional L Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili	C-000.32.840	C-000.32.841	C-000.32.842

Accessori per occhialini e LED LoupeLight disponibili a pagg. 125 – 128.



## Occhialini Binoculari HEINE® HR-C 2.5x con reggicchialini rigido

### HR-C 2.5x Ottiche



⚡ Ottiche multistrati

⚡ Compatti e leggeri

- ⚡ **Ottiche multistrati** per immagini nitide e luminose.
- ⚡ **Super compatti e leggeri** (17 g).
- ⚡ **Acqua-resistenti.**
- ⚡ **Regolazione indipendente delle ottiche** destra e sinistra per una perfetta regolazione della Distanza Pupillare (PD).

#### HR-C 2.5x Dati tecnici

Distanza di lavoro in mm	340	420
Campo visivo in mm	60	70
Profondità di campo in mm	110	140



Montatura lenti di correzione, optional.

### Opzioni di montaggio:

#### ⚡ HEINE S-FRAME®

- ⚡ **Massimo comfort** con un design ergonomico e moderno.
- ⚡ **Stanghette e nasello malleabili** per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di viso.
- ⚡ **Materiali innovativi** – Carbonio Kinetium, riduce il peso (24 g).
- ⚡ **Lenti di protezione in resistente policarbonato.**
- ⚡ **Optional, è applicabile una montatura** per lenti di correzione.

Fascia frontale Lightweight HEINE opzionale. Per le informazioni sull'ordine vedere pagina 125.

#### HR-C 2.5x Set con reggicchialini rigido



Distanza di lavoro in mm	340	420
Ottica HR-C 2.5x	C-000.32.290	C-000.32.291
S-FRAME		
2 Leve Sterilizzabili		
Cinghietta reggimontatura		
Liquido detergente		
Panno per lenti		
Valigetta		

Accessori per occhialini e LED LoupeLight disponibili a pagg. 125 – 128.

## Occhialini Binoculari HEINE® C 2.3

### Combinazione ideale benefici – costo

Ideali per laboratori dentali.



C 2.3

- ⚡ **Immagini nitide e chiare.** Lenti in vetro di quarzo, multistrati e antigraffio producono immagini chiare e nitide.
- ⚡ **Flessibilità per precise regolazioni.** L'indipendente regolazione della Distanza Pupillare assicura l'allineamento preciso delle ottiche.
- ⚡ **Super leggeri e confortevoli: solo 46g.** Le stanghette articolate con la parte terminale a spirale si conformano anatomicamente ai diversi utilizzatori. Leggera montatura in metallo.
- ⚡ **Ideali in ogni situazione.** Il peso minimo, il design compatto ed il costo contenuto rendono gli occhialini C 2.3 ideali in ogni situazione.
- ⚡ **Distanza di lavoro.** 340mm o 450mm (13 o 18 pollici).
- ⚡ **Disponibili anche come C2.3K su fascia Lightweight.**



C 2.3K

Dati tecnici	C 2.3x/340mm	C 2.3x/450mm
Ingrandimento	2,3x	2,3x
Distanza di lavoro	340mm	450mm
Campo di visione Ø	110mm	130mm
Peso	46g	46g
Profondità di campo	120mm	190mm

Errore di rifrazione	Effettiva distanza di lavoro C 2.3x/340mm	Effettiva distanza di lavoro C 2.3x/450mm
+2	440mm	670mm
+1	390mm	560mm
0	340mm	450mm
-1	300mm	420mm
-2	270mm	370mm

#### Informazioni importanti per i portatori di occhiali:

Gli Occhialini Binoculari C 2.3 K possono essere utilizzati anche senza l'impiego di occhiali correttivi. Se preferite visitare senza occhiali, il grafico illustra quanto il vostro errore di rifrazione influirà sulla distanza di lavoro.

#### Occhialini Binoculari C 2.3/C 2.3K

C 2.3/340 Occhialini su montatura in metallo, in astuccio	<b>C-000.32.039</b>
C 2.3/450 Occhialini su montatura in metallo, in astuccio	<b>C-000.32.202</b>
C 2.3K/340 Occhialini su fascia frontale, in valigetta	<b>C-000.32.230</b>
C 2.3K/450 Occhialini su fascia frontale, in valigetta	<b>C-000.32.231</b>

## Accessori



#### Accessori Occhialini Binoculari C 2.3/C 2.3K

Astuccio di protezione per occhialini C 2.3	<b>C-000.32.038</b>
Lenti di protezione per C 2.3 e C 2.3K. Per proteggere le ottiche. Possono essere sterilizzate con i sistemi convenzionali	<b>C-000.32.097</b>

## Occhialini Binoculari

## Informazioni per ordinare

## Ottiche con i-View per S-FRAME, in valigetta trasporto

Distanza di lavoro in mm	340 mm	420 mm	520 mm
HR 2.5x	C-000.32.595	C-000.32.596	C-000.32.597
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C-000.32.721 C-000.32.722	C-000.32.720	

## Ottiche con i-View e S-GUARD per caschetto Professional L

Distanza di lavoro in mm	340 mm	420 mm	520 mm
HR 2.5x	C-000.32.585	C-000.32.586	C-000.32.587
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C-000.32.711 C-000.32.712	C-000.32.710	

## Ottiche con i-View per caschetto Professional L (senza S-GUARD)

Distanza di lavoro in mm	340 mm	420 mm	520 mm
HR 2.5x	C-000.32.733	C-000.32.734	C-000.32.735
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C-000.32.737 C-000.32.738	C-000.32.736	

## Ottiche con reggiccialini rigido per S-FRAME e FASCIA LIGHTWEIGHT

Distanza di lavoro in mm	340 mm	420 mm	520 mm
HR-C 2.5x	C-000.32.265	C-000.32.266	



Accessori per Occhiali HEINE

Informazioni per ordinare



**Opzioni di montaggio**

**S-FRAME\***

per occhiali binoculari **HR, HRP e HR-C** incl. cinghietta reggimontatura e liquido detergente

**C-000.32.302**

\* con lenti per occhiali, grandi (lg).

**Caschetto Professional L**

per ottiche **HR e HRP**

**C-000.32.549**

**Fascia frontale Lightweight**

per ottiche **HR-C** con reggi occhiali rigido

**C-000.32.516**



**Accessori per Occhiali**

**Lenti aggiuntive Close-up**

Con la lente aggiuntiva Close-up si riduce la distanza nominale di lavoro degli occhiali binoculari HR 2.5x da 340 mm a 250 mm.

Lenti aggiuntive Close-up per **HR 2.5x/340mm**

**C-000.32.523**

**Lenti di protezione**

Per proteggere le ottiche degli occhiali binoculari **HR e HRP**

Lenti di protezione per occhiali **HR** (5 pa.) [01]

**C-000.32.537**

Lenti di protezione per occhiali **HRP** (1 pa.) [02]

**C-000.32.027**

**Leve Sterilizzabili**

Per occhiali binoculari **HR e HRP** con i-View (5 pz) [03]

**C-000.32.551**

Per occhiali binoculari **HR-C** con reggiocchiali rigido (2 pz) [04]

**C-000.32.524**

**Valigetta**

Per le sole ottiche o per tutti i set con S-FRAME

**C-000.32.552**

**Accessori vari**

**Clip Universale**

Per Occhiali **HR-C** con reggioculari rigido, si adatta a qualsiasi occhiale.

**C-000.32.518**

**Adattatore Dentale**

Per Occhiali **HR-C** con reggioculari rigido. Per una inclinazione da 20° a 35°. Previene tensioni al collo e alla schiena a causa di posture scorrette.

**C-000.32.528**

## Accessori per Occhialini HEINE

### Informazioni per ordinare



#### Accessori per S-FRAME

Cinghietta reggimontatura S-FRAME	C-000.32.305
-----------------------------------	--------------



#### Set parti di ricambio S-FRAME

con elementi laterali di gomma, naselli in silicone (1 pezzo) e viti	C-000.32.308
--	--------------



#### Montatura clip-in di correzione

per applicare lenti di correzione	C-000.32.309
-----------------------------------	--------------



#### Lenti occhiali, grandi (lg), 1 paio (Standard)

C-000.32.306
--------------



#### Lenti occhiali, piccole (sm), 1 paio

C-000.32.307
--------------

#### Liquido detergente per lenti, 2 pezzi

C-000.32.542
--------------

## HEINE® LED LoupeLight


### Compatto Illuminatore a LED, ideale in ORL e applicazioni dentali




⚡ Leggero

⚡ Coassiale, illuminazione senza ombre

⚡ Fino a 40.000 lux/ distanza 250 mm

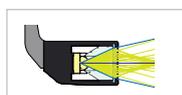

Sistemi convenzionali [01]

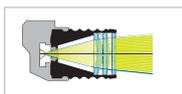

Sistema di lenti di precisione HEINE [02]



- ⚡ **Avanzata tecnologia LED.** Luce bianca ed omogenea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e dentali.
- ⚡ **Illuminazione coassiale.** Per illuminazione senza ombre di piccole cavità, ideale per applicazioni ORL e dentali. Visione coassiale, compatibile con tutti gli occhialini HEINE.
- ⚡ **Compatto, leggero (24 g).** Garantisce un perfetto comfort.
- ⚡ **Chassis in alluminio.** Compatto e di lunga durata con gestione del calore avanzata.
- ⚡ Resistente all'acqua. Facile da pulire.
- ⚡ **Regolazione individuale dell'angolo di visione.** La giusta regolazione in ogni situazione.
- ⚡ **Optional filtro giallo per ridurre la luce blu.** Previene il precoce indurimento dei materiali compositi.

#### Specifiche Tecniche

Illuminazione	Fino a <b>40 000 lux</b> ad una distanza di lavoro di 250 mm
Temperatura di colore	<b>6 250 kelvin</b>
Vita operativa LED	Super-potenza erogata da LED 1 W stimata fino a <b>50.000 ore-lavoro</b>
Regolazione spot luminoso	<b>Diam. 81 mm a 420 mm, diam. 95 mm a 520 mm.</b> Gli occhialini HR/HRP danno risalto al campo illuminato.
Angolo di inclinazione	Regolabile individualmente senza gradini per qualsiasi esame
Ore di funzionamento	17 ore (con mPack LL)

- ⚡ **Sistema ottico di lenti di precisione multiple** composto da quattro lenti di alta qualità. Illuminazione totalmente omogenea dell'intero campo di visione, e uno spot luminoso ben definito.

## HEINE® mPack LL

### Fonte di Energia Portatile



- ⚡ **Alimentatore portatile.** Non limita lo spazio operativo dell'utente come gli alimentatori statici.
- ⚡ **Tripla capacità con la Tecnologia Li-ion.** Rispetto ai tradizionali sistemi NiCd. Senza effetto memoria, autonomia per 17 ore.
- ⚡ **Caricamento veloce.** Carica totale in appena 2 ore.
- ⚡ **Indicatore della capacità della batteria.** Indica in ogni momento quanta autonomia è ancora disponibile.
- ⚡ **Regolazione continua dell'intensità luminosa.** La selezione ottimale della luce previene riflessi.
- ⚡ **Flessibili opzioni di ricarica:** con il caricatore da tavolo/parete EN50 o con il trasformatore a rete.
- ⚡ **Intelligente.** Commutazione automatica nella modalità „in carica“ quando è inserito nell'unità base EN50.
- ⚡ **Trasformatore universalmente compatibile (100 - 240V).** Fornito con 4 diverse spine.



## HEINE® LED LoupeLight e Accessori

## Informazioni per ordinare



[01]

[02]



[03]

## LED LoupeLight

LED LoupeLight per occhialini HR e HRP con i-View girevole [01]	C-008.32.236
LED LoupeLight per occhialini HR-C con reggiocchialini rigido [02]	C-008.32.238

Filtro giallo applicabile (optional) [03]	C-000.32.241
---	--------------



[01]

[02]

## LED Loupe Light con Fonte di Energia

	Per reggiocchialini girevole i-View (HR/HRP)	Per reggiocchialini rigido (HR-C)
LED LoupeLight con mPack LL e EN50 [01]	C-008.32.381	C-008.32.382
LED LoupeLight con mPack LL e trasformatore a rete [02]	C-008.32.384	C-008.32.385



## LED LoupeLight Set con Occhialini Binoculari HR

Ingrandimento e distanza di lavoro in mm	HR 2.5x/340	HR 2.5x/420	HR 2.5x/520
Ottica HR 2.5x con i-View su S-FRAME LED LoupeLight Filtro giallo applicabile mPack LL Caricatore EN50 (unità base) Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Cinghietta reggimontatura Liquido detergente Panno per lenti Valigetta	C-008.32.355	C-008.32.356	C-008.32.357



## LED LoupeLight Set con Occhialini Binoculari HRP

Ingrandimento e distanza di lavoro in mm	HRP 3.5x/420	HRP 4x/340	HRP 6x/340
Ottica HRP con i-View su S-FRAME LED LoupeLight Filtro giallo applicabile mPack LL Caricatore EN50 (unità base) Lenti di protezione 2 Leve Sterilizzabili Cinghietta reggimontatura Liquido detergente Panno per lenti Valigetta	C-008.32.430	C-008.32.431	C-008.32.432